

Vox4all® - Manual de Utilização

<http://arca.imagina.pt/manuais/Manual-Vox4all-BR.pdf>

vox4all

A voz ao seu alcance!



**Software de comunicação aumentativa e alternativa
para *smartphone* e *tablet***

Projeto co-financiado pelo QREN, pelo Mais Centro – Programa Operacional Regional do Centro e da União Europeia Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional – projeto nº CENTRO-07-0202-FEDER-022839

FICHA TÉCNICA E COPYRIGHT

Título	<i>Vox4all® – Manual de Utilização</i>
Autores	Mafalda Mendes Patrícia Correia
Composição, Edição e Execução Gráfica	Cnotinfor, Lda Casa S. Francisco Estrada de Assafarge, 6 - Marco dos Pereiros 3040-718 Castelo Viegas – Coimbra Portugal Tel.: (+351) 239499230 Fax: (+351) 239499239 info@imagina.pt www.imagina.pt

Créditos Vox4all®

Autoria	Secundino Correia Mafalda Mendes
Programação	João Ribeiro
Ilustração	Sara Simões Hugo Martins
Tradução	Patrícia Correia Armanda Quintela Margarida Silva
Vozes	Acapela: Célia Márcia Graham António
Testes	APPDA e APPACDM de Coimbra APPC
Supervisão	Secundino Correia Nuno Machado
Versão	1.1.0

Vox4all © Cnotinfor 2012

Símbolos para Alfabetização da Wigit (versão para todos os países de Língua Portuguesa)
© Cnotinfor 2004-2013

Wigit Literacy Symbols © Wigit Software 2004-2013

Vox4all® utiliza tecnologia de síntese de voz licenciada pelo Grupo Acapela

1ª Edição Português do Brasil: Abril 2013

© Cnotinfor 2013

CONTEÚDO

1	<u>INTRODUÇÃO</u>	4
2	<u>VISÃO GERAL</u>	5
	AMBIENTES DA APLICAÇÃO	5
	AMBIENTE USUÁRIO	5
	AMBIENTE ADMINISTRADOR	5
	PRINCIPAIS ELEMENTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	6
	PRANCHA DE COMUNICAÇÃO	6
	BARRA DE ACESSO RÁPIDO	6
	CÉLULAS	7
	PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO	7
	AJUDA	7
	SELEÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE OPÇÕES	7
	ESCREVER TEXTO	8
	DESLOCAÇÃO	8
3	<u>MENU OPÇÕES</u>	9
	OPÇÕES: PRANCHAS – GERENCIAR AS PRANCHAS DA APLICAÇÃO	9
	OPÇÕES: APARÊNCIA – DEFINIR CORES E TAMANHO DAS PRANCHAS	10
	OPÇÕES: ACESSIBILIDADE – TEMPO DE TOQUE E SÍNTESE DE VOZ	10
	OPÇÕES: GERAL – SEGURANÇA E IDIOMA	11
4	<u>MENU PRANCHA</u>	12
	EDITAR BARRA DE ACESSO RÁPIDO	12
	EDITAR PRANCHA	13
5	<u>MENU CÉLULAS</u>	14
	DEFINIR O TIPO DE CONTEÚDO DA CÉLULA	14
	INSERIR IMAGEM A PARTIR DOS ARQUIVOS DO DISPOSITIVO	15
	INSERIR SÍMBOLO DA BIBLIOTECA	15
	UTILIZAR UMA FOTO	15
	INSERIR TEXTO	16
	SÍNTESE DE VOZ	16
	GRAVAR SOM	16
	OUVIR SOM DA CÉLULA	16
	DEFINIR LIGAÇÃO DA CÉLULA	16
	EDITAR COR DA CÉLULA	17
	ADICIONAR CÉLULAS	17
	ELIMINAR CÉLULAS	18
	EDITAR VÁRIAS CÉLULAS AO MESMO TEMPO	18
6	<u>SÍMBOLOS PARA ALFABETIZAÇÃO DA WIDGIT</u>	19
7	<u>FAÇA PARTE DA COMUNIDADE IMAGINA</u>	20

1 INTRODUÇÃO




O Vox4all® é um sistema de comunicação aumentativa e alternativa pensado e desenhado para funcionar nos dispositivos móveis, *smartphone* e *tablet*. Ele utiliza as principais funcionalidades desses equipamentos: tela tátil, camera fotográfica e saída de voz, tornando a aplicação interativa e apelativa ao usuário.

O Vox4all® permite que pessoas com problemas na fala e na linguagem possam comunicar de forma segura e independente. A comunicação é feita através de símbolos, imagens e sons representativos.



Leia este manual para aprender e conhecer todas as funcionalidades do Vox4all®.

IMPORTANTE: É possível acessar este manual dentro da aplicação. Para isso deve:

1. Tocar em 
2. Tocar em 
3. Tocar em **CONSULTAR** para visualizar o manual em formato *.pdf*. Para terminar a visualização do manual, toque em .

2 VISÃO GERAL

Leia este capítulo para conhecer como o Vox4all® se encontra organizado e aprender os princípios básicos de funcionamento desta aplicação.

AMBIENTES DA APLICAÇÃO

A aplicação tem dois ambientes: **AMBIENTE USUÁRIO** e **AMBIENTE ADMINISTRADOR**.


AMBIENTE USUÁRIO

Este ambiente é utilizado para o usuário comunicar através do uso deste sistema de comunicação.

As opções de edição estão desativadas.



Ao tocar no ícone **CONFIGURAÇÕES**  você entra no ambiente **ADMINISTRADOR**.

Nota: Para impedir o acesso ao ambiente **ADMINISTRADOR** pode ativar a opção **SEGURANÇA** (ver página 11) e usar uma senha. Assim, sempre que tocar o ícone **CONFIGURAÇÕES**  deverá inserir uma senha para entrar no **AMBIENTE ADMINISTRADOR**.

AMBIENTE ADMINISTRADOR


É com este ambiente que consegue construir todo o sistema de comunicação.

Pode definir as opções gerais da aplicação, editar ou criar novas células e pranchas. As opções de edição estão sempre ativas.



PRINCIPAIS ELEMENTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Quando inicia a aplicação, visualiza a tela seguinte.

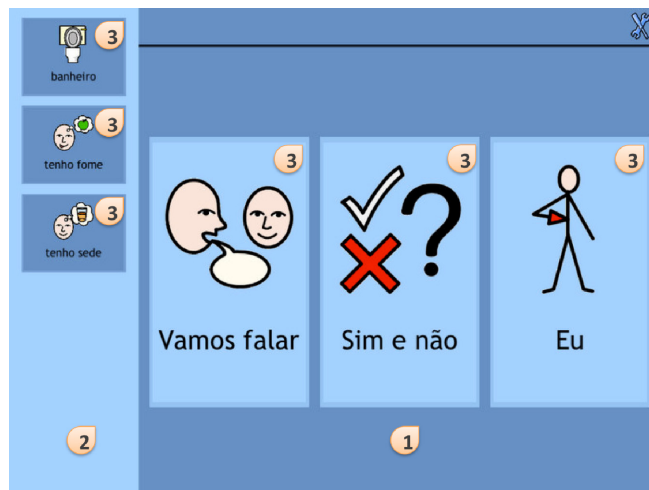

Aqui encontra alguns elementos que têm funcionalidades diferentes:

- 1 Prancha de comunicação
- 2 Barra de acesso rápido
- 3 Células

PRANCHA DE COMUNICAÇÃO

A área para a prancha de comunicação inclui inicialmente 3 células: **VAMOS FALAR**, **SIM E NÃO** e **EU**. Estas células estarão sempre presentes e não podem ser eliminadas. Consegue, se desejar, acrescentar mais células para incluir outras informações.

BARRA DE ACESSO RÁPIDO

A barra de acesso rápido está sempre disponível na tela no local definido pelo administrador. A ideia para essa barra é incluir algumas células (no máximo 3) que permitam a comunicação imediata. Elas poderão abrir ou não outras pranchas.

CÉLULAS

Todas as células, sejam da barra de acesso rápido ou das pranchas, são totalmente editáveis e configuráveis. Ao clicar nelas, o seu conteúdo é visualizado e/ou é ouvido um som. Elas também possibilitam incluir uma ligação para abrir uma outra prancha.

As células padrão que vão incluídas na prancha de comunicação inicial são:


- **Vamos falar:** abre uma prancha com várias células para acesso a informação.
- **Sim e não:** abre uma prancha com as células Sim e Não. Se desejar, pode alterar o símbolo para cada uma destas palavras.
- **Eu:** as células e pranchas acessadas incluem informação sobre o usuário final.

Os exemplos incluídos na aplicação podem ser completamente alterados.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO

Aqui apresentamos algumas funcionalidades transversais a toda a aplicação. Elas são utilizadas para a navegação nos menus, opções e/ou janelas.

AJUDA

Algumas funcionalidades possuem ajuda. Para você ler a **AJUDA** para uma funcionalidade, toque em .

SELEÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE OPÇÕES

Normalmente, nas caixas de seleção, são apresentadas as opções definidas no momento. Se desejar modificá-las, deve tocar na caixa de seleção para ver mais opções. Depois é só escolher a opção desejada e ela ficará selecionada.





ESCREVER TEXTO

Toque em um campo de texto para ver o teclado virtual. Depois é só escrever.



DESLOCAÇÃO

Nem sempre é possível visualizar todos os conteúdos de uma janela na tela. Para ver as outras opções, deve arrastar o dedo na direção da barra.



Sempre que visualizar esta barra, arraste o dedo para cima na direção da barra

3 MENU OPÇÕES

No menu **OPÇÕES**, você encontra as características gerais da aplicação. Leia este capítulo para conhecer todas as funcionalidades disponíveis.


Quando toca no ícone **OPÇÕES**  se abre uma janela com quatro abas:

- Pranchas
- Aparência
- Acessibilidade
- Geral




OPÇÕES: PRANCHAS – GERENCIAR AS PRANCHAS DA APLICAÇÃO


Na **OPÇÃO PRANCHAS** você consegue gerenciar todas as pranchas disponíveis na aplicação em um dado momento.

- **Alterar identificação da prancha:** toque no ícone  para alterar o nome que identifica a prancha. Note que entre parêntesis () você pode ver o título que fica visível quando abre essa prancha. Esse título pode ser diferente do nome de identificação da prancha, ver **EDITAR PRANCHAS**.

- **Eliminar pranchas:** toque no ícone  da prancha que pretende eliminar.

Nota: Para eliminar uma prancha é importante que não exista nenhuma célula com uma ligação para essa prancha.



- **Usar prancha específica ao iniciar:** para definir a prancha que aparece primeiro quando o Vox4all® inicia, toque na caixa de seleção ☐ e selecione a prancha que será utilizada para iniciar a aplicação. Essa prancha ficará com o ícone .

Nota: Para esta opção ser válida deve tocar em **CONCLUÍDO** , encerrar a aplicação e iniciá-la novamente. O encerramento de aplicações não funciona do mesmo modo em todos os equipamentos. Deve verificar como se encerra uma aplicação no seu dispositivo.


OPÇÕES: APARÊNCIA – DEFINIR CORES E TAMANHO DAS PRANCHAS

Na **OPÇÃO APARÊNCIA**, pode definir o esquema de cores da aplicação, as características padrão para novas células e pranchas que você criar.

O fato de você escolher um padrão não impossibilita definir outras características para uma célula ou prancha específicas. Nesse caso, as alterações já serão feitas no menu **PRANCHAS** ou no menu **CÉLULAS**.



- **Definir esquema de cores:** pode escolher um esquema de cor já existente ou definir o esquema que você quiser (Personalizado). Escolha o esquema Personalizado e defina a cor do fundo das células e a cor do fundo das pranchas.
- **Definir tamanho de novas pranchas:** alterar o tamanho das pranchas significa definir o número de linhas e colunas da prancha. Para modificar o tamanho toque no ícone  para aumentar e no ícone  para diminuir.

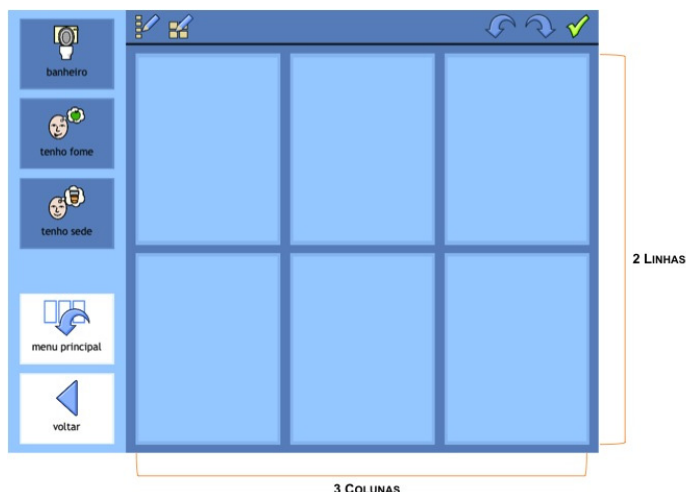Definir o número de linhas e colunas significa definir o número de células da prancha.



OPÇÕES: ACESSIBILIDADE – TEMPO DE TOQUE E SÍNTESE DE VOZ

Para alguns usuários, nomeadamente usuários com problemas motores, por vezes é necessário reajustar o tempo de toque.

- **Definir tempo de toque:** toque no ícone  para aumentar ou no ícone  para diminuir o tempo em segundos que a aplicação deve demorar para selecionar uma célula.

Nota: Esta opção apenas tem efeito no ambiente **USUÁRIO**.

O modo de uso da **síntese de voz** é diferente em equipamentos iOS e Android.

Para iOS:

- **Definir voz do sintetizador (iOS):** Para utilizar a síntese de voz você precisa ter uma voz selecionada.

Nota: Dependendo do idioma selecionado, as vozes disponíveis são diferentes.

- **Comprar uma voz sintetizada (iOS):** Se ainda não comprou nenhuma voz, quando selecionar a voz do sintetizador aparecem todas as vozes disponíveis, no idioma que você tem selecionado, mas elas estarão desativadas. Para comprá-las basta seguir as instruções quando toca em **COMPRAR**.

Nota: Quando você compra a voz, pode usá-la sempre que desejar.


Para Android:

- **Definir voz do sintetizador (Android):** para utilizar a síntese de voz deve ativar o mecanismo de síntese de voz Google. A alteração da voz do sintetizador é feita fora da aplicação nas definições do seu dispositivo.

OPÇÕES: GERAL – SEGURANÇA E IDIOMA

Para evitar que outro usuário altere as definições da aplicação, pode ativar a opção **SEGURANÇA** e permitir a introdução de uma senha para acessar o ambiente **ADMINISTRADOR**.


Permitir senha:

- 1 Escolha a opção “Sim”.
- 2 Introduza uma nova senha e depois insira a mesma senha de novo.
- 3 Toque no ícone  para salvar a senha que você definiu.

Quando abre a aplicação pela primeira vez, você deverá escolher o idioma da aplicação, no entanto pode escolher outro mais tarde se desejar.

Alterar idioma: toque no idioma definido para ver as restantes opções. Toque na bandeira do país correspondente ao idioma que você pretende escolher.

Nota: Dependendo da sua versão poderá ter todos ou apenas alguns dos idiomas indicados disponíveis.

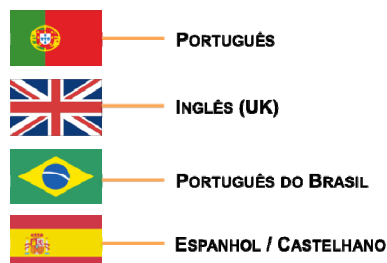


4 MENU PRANCHA

Leia este capítulo para ver como editar a barra de acesso rápido e a prancha onde você está nesse momento.

Para acessar o menu **PRANCHA**, deve tocar no botão


Prancha

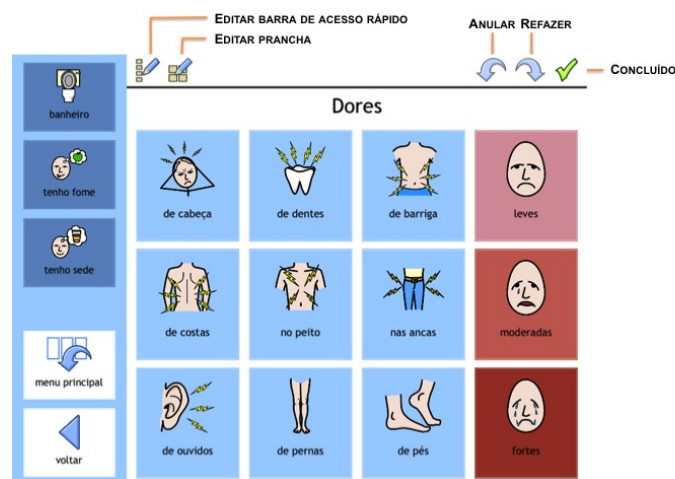

EDITAR BARRA DE ACESSO RÁPIDO

A barra de acesso rápido está sempre visível e tem a mesma aparência em toda a aplicação. Todas as alterações que fizer na barra de acesso rápido e nas suas células ficam disponíveis para toda a aplicação.


ATENÇÃO: As células da barra de acesso rápido são editadas no menu **CÉLULAS**.

Para editar a barra de acesso rápido toque em .


Verá a janela seguinte.

- **Cor igual ao esquema:** Se não utilizar a cor igual ao esquema, sempre que o esquema de cores da aplicação for alterado a cor da barra ficará igual ao invés de assumir a cor do novo esquema definido.
- **Cor de fundo:** Escolhendo a cor do fundo está dizendo que não quer utilizar o esquema de cores definido para a aplicação nesta barra.
- **Posição da barra de acesso rápido:** Dependendo da lateralidade da pessoa que utiliza o sistema de comunicação é possível posicionar a barra de acesso rápido do lado esquerdo ou do lado direito da aplicação.

EDITAR PRANCHA




Para editar a prancha toque no ícone de edição .

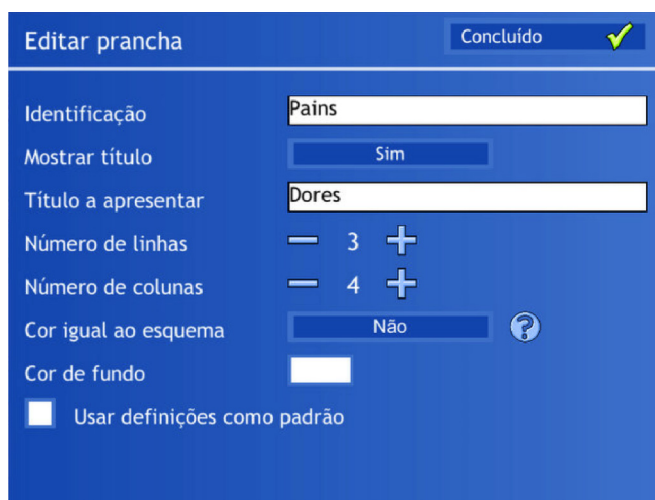Surge a janela seguinte.



A janela 'Editar prancha' possui um botão 'Concluído' com uma seta verde no canto superior direito. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Identificação:** Campo de texto com o valor 'Pains'.
- Mostrar título:** Botão 'Sim'.
- Título a apresentar:** Campo de texto com o valor 'Dores'.
- Número de linhas:** Controlo deslizante com o valor 3, ícone de menos à esquerda e ícone de mais à direita.
- Número de colunas:** Controlo deslizante com o valor 4, ícone de menos à esquerda e ícone de mais à direita.
- Cor igual ao esquema:** Botão 'Não' e ícone de ajuda (?) à direita.
- Cor de fundo:** Campo de cor com uma amostra branca.
- Usar definições como padrão:** Caixa de seleção desmarcada.

- **Identificação:** Este é o nome atribuído à prancha e possibilita sua identificação na aplicação. Pode alterar o nome com que identificou a prancha quando a criou em **LIGAÇÃO DA CÉLULA** (Ver página 16).
- **Definir tamanho de novas pranchas:** Alterar o tamanho das pranchas significa definir o número de linhas e colunas da prancha. Toque no ícone  para aumentar o número de linhas ou colunas e no ícone  para diminuir.
- **Título a apresentar:** Pode mostrar ou esconder o título da prancha em sua visualização. Caso prefira que ele fique visível pode escolher um nome diferente do que utilizou na identificação da prancha.
- **Cor igual ao esquema:** Se não utilizar a cor igual ao esquema, sempre que o esquema de cores da aplicação for alterado a cor do fundo da prancha ficará igual ao invés de assumir a cor do novo esquema definido.
- **Cor de fundo:** Escolhendo a cor do fundo está dizendo que não quer utilizar o esquema de cores definido nesta prancha.
- **Usar definições como padrão:** Todas as opções escolhidas, com excepção do nome da prancha, ficam sendo as utilizadas em novas pranchas criadas. Para isso deverá seleccionar a opção .


5 MENU CÉLULAS



Neste capítulo, você vai ver como editar os conteúdos das células das diferentes pranchas. Vai ver também como eliminar células que não quer e/ou adicionar novas células às pranchas que já tem.


Os conteúdos que pode incluir nas células são:

- Símbolos ou fotos
- Texto
- Som gravado

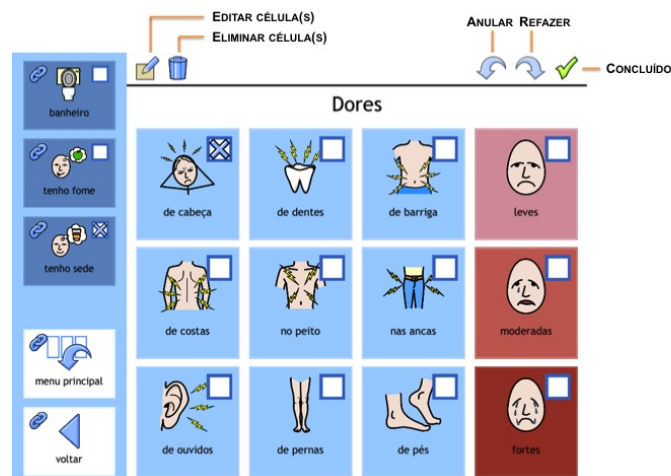Para acessar o menu Células, toque em **Células**.




Toque diretamente na célula que pretende editar ou selecione a célula  e toque no ícone de edição . Verá a janela de edição seguinte.

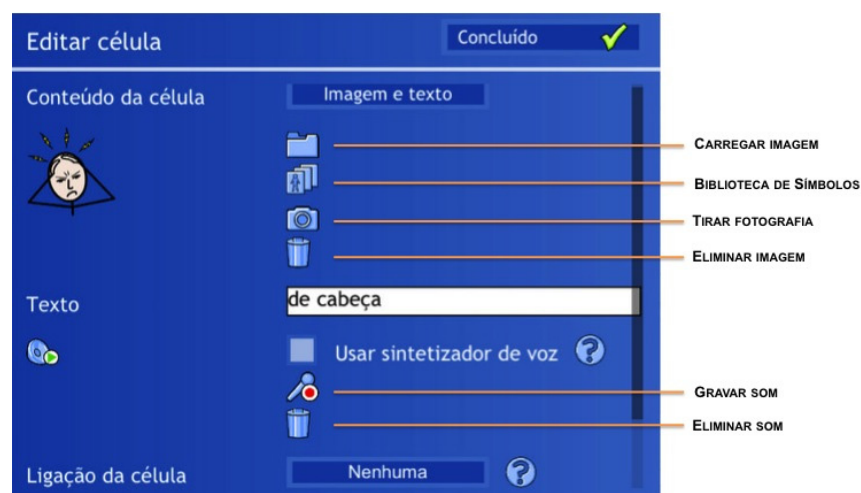

DEFINIR O TIPO DE CONTEÚDO DA CÉLULA

As células podem ter imagem e texto, apenas imagem ou apenas texto.


INSERIR IMAGEM A PARTIR DOS ARQUIVOS DO DISPOSITIVO

- 1 Para utilizar uma imagem já guardada no seu dispositivo toque no ícone .
- 2 Procure e toque na imagem que deseja incluir na célula.

INSERIR SÍMBOLO DA BIBLIOTECA

Está disponível uma Biblioteca que inclui mais de 12.000 Símbolos para Alfabetização da Wigit (ver mais informações no *capítulo* Símbolos para alfabetização da Wigit).

Para inserir um símbolo em uma célula:


- 1 Toque no ícone  para abrir a biblioteca de símbolos.
- 2 Toque na caixa de texto e digite uma palavra que descreva o que você procura. Enquanto está escrevendo, vão aparecendo vários símbolos.
- 3 Baixe o teclado virtual e escolha o símbolo que mais se adequa ao conceito que pretende simbolizar.

Nota: Se aparecer uma barra de deslocação no fundo da janela, faça a deslocação com os dedos - no sentido da barra - para ver mais sugestões de símbolos.



- 4 Toque no **CONCLUÍDO**  para sair da Biblioteca de símbolos.

IMPORTANTE: Existem muitas palavras que poderão ter significados diferentes. Por isso, é muito importante que o símbolo selecionado seja o mais adequado para representar o seu significado.

UTILIZAR UMA FOTO

- 1 Toque em  para abrir a janela de captura fotográfica.
- 2 Tire a foto.

Se você tiver um equipamento Android, deve continuar com os passos seguintes:

- 3 Se desejar tirar outra foto, toque em  para removê-la e tire uma nova.
- 4 Toque em **CONCLUÍDO**  para salvar e incluir a foto na célula.

INSERIR TEXTO

Toque nesta caixa para escrever o texto. Vai aparecer um teclado para você digitar a palavra desejada. Este campo permite a introdução de palavras e/ou expressões com um máximo de 16 caracteres.

SÍNTESE DE VOZ

A opção **USAR SINTETIZADOR DE VOZ** apenas pode ser ativada caso ela seja previamente escolhida no menu **OPÇÕES**, na aba **ACESSIBILIDADE** (ver página 10).

Depois de selecionada na aba **ACESSIBILIDADE**, pode usar o sintetizador de voz. Para isso deve tocar em ☐ para que esta fique selecionada ☒. Vai aparecer uma caixa de texto, aí deverá digitar o texto que pretende que seja lido pelo sintetizador.

GRAVAR SOM




- 1 Toque em para abrir a janela gravação de som.
- 2 Toque em para iniciar a gravação.
- 3 Para parar a gravação toque em .
- 4 Para ouvir a última gravação toque em .
- 5 Para gravar novamente toque em .
- 6 Para eliminar o som toque em .
- 7 Para guardar e associar o som à célula, toque em **CONCLUÍDO** .


OUVIR SOM DA CÉLULA


Na janela de edição da célula, toque no botão para ouvir o som associado a essa célula.

DEFINIR LIGAÇÃO DA CÉLULA

A ligação da célula a uma prancha poderá ser feita para uma prancha que já existe na aplicação ou para uma nova.

- **Prancha existente:** Para ligar a célula a uma prancha que já existe na aplicação, toque na caixa “Nenhuma” ou que tem o nome de uma prancha e selecione o nome da prancha que pretende abrir quando toca nessa célula.
- **Nova prancha:** Para criar uma ligação para uma prancha que ainda não existe, toque na caixa de texto para escrever o nome da nova prancha e de seguida toque em  para adicioná-la à lista. A opção para criar uma nova prancha está no final da listagem de todas as pranchas da aplicação.

Nota: No menu **CÉLULAS** quando uma célula tem esse ícone  no canto superior esquerdo significa que tem uma ligação para uma prancha.

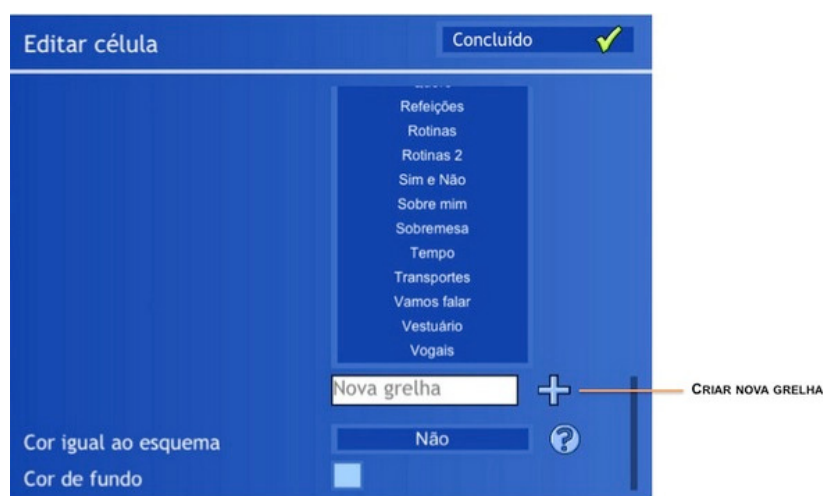


EDITAR COR DA CÉLULA

- **Cor igual ao esquema:** Se não utilizar a cor igual ao esquema, sempre que o esquema de cores da aplicação for alterado a cor da célula ficará igual ao invés de assumir a cor do novo esquema definido.
- **Cor de fundo:** Escolhendo a cor do fundo está dizendo que não quer utilizar o esquema de cores definido nesta célula.



ADICIONAR CÉLULAS

No menu **PRANCHAS** quando definir um número maior de linhas e/ou colunas do que as que estão disponíveis na prancha, você está aumentando o número de células dessa prancha. No entanto essas células não estão ainda criadas, porque precisam de conteúdos.



Para adicioná-las à prancha, toque em . Será aberta a janela de edição das células (já indicada anteriormente).





ELIMINAR CÉLULAS

Eliminar uma ou mais células: selecione a célula ou células  que pretende eliminar e toque no ícone  que está no topo da prancha.

EDITAR VÁRIAS CÉLULAS AO MESMO TEMPO

- **Editar duas ou mais células ao mesmo tempo:** selecione as células que pretende editar e toque em . Quando você edita duas ou mais células ao mesmo tempo apenas consegue definir o tipo de conteúdo e a cor dessas células.
- **Usar definições como padrão:** Todas as opções escolhidas podem ser utilizadas como padrão na criação de novas células. Para isso selecione a opção .


Nota: Como está selecionando mais do que uma célula, onde deveria selecionar a cor do fundo você vai ver um . A cor que você escolher será igual para todas as células selecionadas.

Editar células
Concluído 


Conteúdo da célula

Selecionar opção

Cor igual ao esquema

Selecionar opção 

Cor de fundo

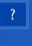


☐ Usar definições como padrão

6 SÍMBOLOS PARA ALFABETIZAÇÃO DA WIDGIT

Esta aplicação inclui um conjunto com mais de 12.000 Símbolos para a Alfabetização da Widgit. Estes símbolos são disponibilizados a cores.

Esta **biblioteca de símbolos** foi criada especificamente com o objetivo de desenvolver a alfabetização. Anteriormente conhecidos como Símbolos Rebus da Widgit, eles têm uma estrutura clara de grande parte do vocabulário. Foram concebidos para ter poucos detalhes para reduzir a confusão visual.

Muitos símbolos são imediatamente reconhecíveis por qualquer pessoa. Mas existem outros que têm de ser aprendidos. Através de uma utilização constante e o uso de critérios de concepção consistentes, os Símbolos para a Alfabetização da Widgit pretendem facilitar o processo de aprendizagem e a comunicação.

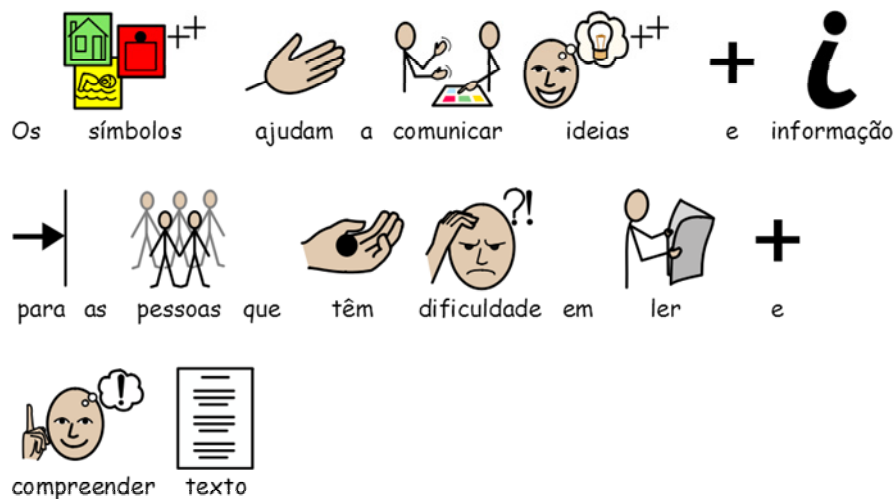

7 FAÇA PARTE DA COMUNIDADE IMAGINA

Apostamos continuamente na melhoria e inovação dos nossos produtos. Estamos sempre abertos a novas sugestões e partilhas.

Faça o seu registo na Comunidade Imagina e vai conseguir:

- Fazer uma compra na loja on-line: <http://www.imagina.pt>
- Participar em cursos à distância: <http://formacao.cnotinfor.pt/online>
- Ter acesso gratuito às atividades: <http://atividades.imagina.pt>
- Comentar as notícias do blog: <http://bica.imagina.pt>

Seja fã no Facebook: <https://www.facebook.com/cnotinfor>